

Onda de Choque 2500S PLUS

NUEVO

2 Canales

Ahora con Manípulo Vibratorio

El tratamiento ideal que moldea el cuerpo

Las ondas acústicas proporcionan un
tratamiento ideal para moldear el cuerpo.



Hasta 5.0 Bar y 35Hz


www.indesamedical.com

INDESA
MEDICAL



⊕ Aplicaciones

- ◆ Tratamiento anticelulítico.
- ◆ Remodelación corporal.
- ◆ Mejora la elasticidad de la piel.
- ◆ Tratamiento de la irregularidad de la piel después de la liposucción.
- ◆ Tratamiento de arrugas y cicatrices.
- ◆ Estimula el sistema linfático.
- ◆ Tratamiento de las estrías.



Onda de Choque 2500S PLUS

Efectos específicos de la terapia vibratoria



El tratamiento de ondas de choque acústicas utiliza los mecanismos de reparación natural del cuerpo humano para reafirmar el tejido.

La compresión y descompresión provoca efectos biológicos microscópicos intersticiales y extracelulares, que potencia el incremento de la circulación sanguínea, la vascularización y la regeneración de los tejidos.

Entre sus efectos terapéuticos se busca la rotura parcial de los septos fibrosos causantes del aspecto de la piel de naranja.

Mecanismo de la acción vibratoria

Son impulsos vibratorios que se introducen de manera controlada y segura.

- ◆ Mejora la microcirculación.
- ◆ Reduce el estrés.
- ◆ Produce Bienestar general.
- ◆ Aumenta la evacuación de productos de desecho a través de la sangre y la linfa.




+ Efectos

- ◆ Contorno corporal
- ◆ Tratamiento celulitis
- ◆ Reafirmación del tejido
- ◆ Suaviza las cicatrices

+ Beneficios

- ◆ Estimulación de la microcirculación (sangre/linfa).
- ◆ Reducción de grasa en las células adiposas, aumentando la permeabilidad de las células grasas.
- ◆ Aumento de la elasticidad de las fibras del tejido conectivo.
- ◆ Mejora de la tonicidad de la piel.

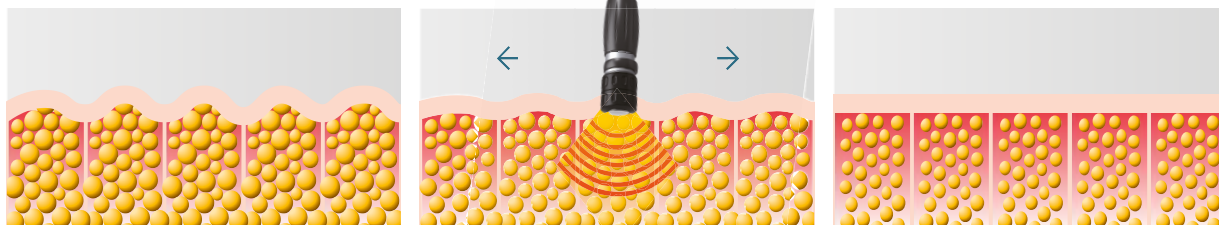

+ Transmisores

Transmisores incluidos			
Modelo	15 D (D = 15 mm Profundo)	20 R (D = 20 mm Radial)	36 R (D = 36 mm Radial)
Penetración	0 - 60 mm	0 - 50 mm	0 - 50 mm
Indicaciones	Rompe la grasa y tejido conectivo en las zonas más profundas, estimula el flujo sanguíneo linfático.	Incrementa el riego sanguíneo y flujo linfático. Estimula la creación de un nuevo colágeno.	Relaja la musculatura y tejido conectivo en grandes zonas, incrementa el riego sanguíneo y flujo linfático.

			
Transmisores manípulo vibratorio			
Penetración	10 mm	25 mm	40 mm
Indicaciones	Tratamiento selectivo de musculo Manchas.	Músculo blando, masaje a lo largo de la dirección de el músculo a excluir fluido linfático.	Área grande masaje muscular después del tratamiento de onda de choque.

+ Especificaciones técnicas

Modelo	LGT-2500S PLUS (NUEVO)
	
Canal	2 (1 manípulo general) (1 manípulo vibratorio)
Pantalla	7" LCD táctil color
Presión	1.0~5.0 Bar
Frecuencia	1~22Hz
Manipulo vibratorio	1~35Hz
Modo pulsado	Sí
Protocolos pre-establecidos	Sí
Protocolos definidos usuario	Sí
Dimensiones	39.5 (L) x 39 (W) x 19.4 (H) cm
Peso	11.3 kg

Certificaciones 2500SPUS

	Promoting member of ISMST
	CE (MDD)
	ISO13485 / ISO9001
	Health Canada
	Therapeutic Goods Administration
	INMETRO

